



Medical Devices, Inc.
 4401 Varsity Dr Suite D
 Ann Arbor, MI 48108
 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com

HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F

Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

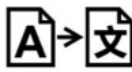

Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Produktbeschreibung:

Halo Seal and Halo XL bestehen aus einer haftenden Hydrogelschicht und einer haftenden, latexfreien Trägerschicht. Es ist flüssigkeitsundurchlässig und dichtet die Wunde ab, bis der Patient in eine Gesundheitseinrichtung transportiert werden kann.

Hinweise zur Verwendung:

Halo-Produkte wurden entwickelt, um die Behandlung von Brustwunden zu unterstützen, indem Standardtechniken zum Anlegen von Verbänden verwendet werden, die Zivilisten oder Rettungskräften helfen. Entwickelt, um Wunden abzudecken und zu schützen. Verwenden Sie den Verband nicht als Ersatz für Nähte und andere primäre Wundverschlussmethoden. Halo-Produkte sind Einwegprodukte. Versuche, ein Halo-Produkt wiederzuverwenden, können bei einem sekundären Patienten eine Kontamination und Infektion hervorrufen. Für postoperative Anwendungen liegen keine Hinweise auf Verwendung, Sicherheit, Risiko oder Wirksamkeit vor.

Warnungen:

Stellen Sie sicher, dass der Halo den Umfang der Wunde vollständig abdichtet, um das Eindringen von Luft, Flüssigkeiten und Fremdkörpern zu verhindern. Personen mit Thoraxverletzungen sollten zur Nachsorge und Behandlung sofort zu einer medizinischen oder traumatologischen Einrichtung gebracht werden, um von einem Kliniker untersucht zu werden. Platzieren Sie die Versiegelung nicht über großen Schmutzstücken, damit das Hydrogel eine vollständige Versiegelung bilden kann.

Anwendung:

- Saubere und trockene Wunde
- Von Trennfolie entfernen. Vor dem Auftragen nicht auf die sekundäre Oberfläche legen, um eine Kontamination zu vermeiden.
- Mit der Gelseite nach unten über die Mitte der Wunde legen.
- Üben Sie leichten Druck aus - Dehnen Sie sich während der Anwendung nicht.
- Verwenden Sie zusätzliche Halo Seals, wenn andere Wunden vorhanden sind.



Anwendungsvideo

Transportieren Sie den Patienten zur Nachbehandlung und Bewertung in eine Notfallversorgungseinrichtung

Entsorgen Sie es nach Gebrauch gemäß den örtlichen Abfallrichtlinien für medizinische Geräte.

Kontaktinformationen:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Bitte wenden Sie sich an den Hersteller und die Aufsichtsbehörde oder melden Sie schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt.

NB#
2862

EC REP
 Obelis s.a.
 Bd. Général Wahis 53
 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
 Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment

