



Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D  
Ann Arbor, MI 48108  
(800) 828-4681



info@medicaldevicesinc.com

HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C  
-30°F



Designated  
Temperature

60°C  
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if  
Package is  
Damaged or



Not  
Manufactured  
with Natural



Instructions  
Available

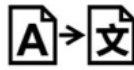

Translation  
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

### Περιγραφή προϊόντος:

Το Halo Seal and Halo XL αποτελείται από ένα συγκολλητικό στρώμα υδρογέλης και ένα αυτοκόλλητο, μη λατέξ στρώμα υποστήριξης. Είναι αδιαπέραστο από τα υγρά και σφραγίζει την πληγή μέχρι να μεταφερθεί ο ασθενής σε Μονάδα Υγείας.

### Ενδείξεις χρήσης:

Τα προϊόντα Halo έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη θεραπεία τραυμάτων του θώρακα χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές εφαρμογής επίδεσμου που βοηθούν τους πολίτες ή τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης. Σχεδιασμένο να καλύπτει και να προστατεύει τις πληγές. Μην χρησιμοποιείτε τον επίδεσμο ως υποκατάστατο για ράμματα και άλλες πρωτογενείς μεθόδους κλεισίματος πληγών. Τα προϊόντα Halo είναι ένα προϊόν μίας χρήσης. Οι προσπάθειες επαναχρησιμοποίησης προϊόντων Halo ενδέχεται να προκαλέσουν μόλυνση και μόλυνση σε δευτερεύοντα ασθενή. Δεν υπάρχουν ενδείξεις χρήσης, ασφάλειας, κινδύνου ή αποτελεσματικότητας για μετεγχειρητικές εφαρμογές.

### Προειδοποιήσεις:

Βεβαιωθείτε ότι το Halo σφραγίζει πλήρως την περίμετρο του τραύματος για να αποτρέψει την είσοδο αέρα, υγρών και υπολειμμάτων. Άτομα που έχουν θωρακικό τραύμα θα πρέπει να μεταφέρονται αμέσως σε μονάδα υγειονομικής περίθαλψης ή τραύματος για αξιολόγηση από κλινικό ιατρό για μετέπειτα φροντίδα και θεραπεία. Μην τοποθετείτε τη σφράγιση πάνω από μεγάλα κομμάτια υπολειμμάτων, ώστε η υδρογέλη να μπορεί να σφραγίσει πλήρως.

### Εφαρμογή:

Καθαρή και στεγνή πληγή.

Αφαιρέστε από την επένδυση απελευθέρωσης. Μην τοποθετείτε σε δευτερεύουσα επιφάνεια πριν την εφαρμογή για να αποφύγετε τη μόλυνση.

Με την πλευρά του Gel προς τα κάτω, τοποθετήστε το πάνω από το κέντρο της πληγής.

Χρησιμοποιήστε ελαφριά πίεση - Μην τεντώνετε κατά την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε επιπλέον Halo Seals, εάν υπάρχουν άλλα τραύματα.



Βίντεο εφαρμογής

Μεταφορά ασθενούς σε Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας για Μετά τη Θεραπεία και Αξιολόγηση

Απορρίψτε μετά τη χρήση, σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες για τα απόβλητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

### Στοιχεία επικοινωνίας:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Επικοινωνήστε ή αναφέρετε τυχόν σοβαρά περιστατικά σχετικά με αυτό το προϊόν στον κατασκευαστή και στις ρυθμιστικές αρχές.

NB#  
2862

EC REP  
Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 60. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0564 Greek Rev. 01



CLEAN AND  
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT  
FROM PACKAGING.  
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT  
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to  
Emergency Care Facility for  
Evaluation and Post  
Treatment

