



Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D  
Ann Arbor, MI 48108  
(800) 828-4681



info@medicaldevicesinc.com

HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C  
-30°F



Designated  
Temperature

60°C  
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if  
Package is  
Damaged or



Not  
Manufactured  
with Natural



Instructions  
Available

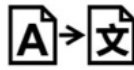

Translation  
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

#### Cur Síos ar an Táirge:

Tá Halo Seal agus Halo XL comhdhéanta de chiseal hidrogel ghreamaitheach agus ciseal taca ghreamaitheacha, neamh-latex. Tá sé neamh-thréscailteach an fhoirceannadh a leachtanna agus a róna go dtí gur féidir an t-othar a iompar chuig Áis Cúraim Sláinte.

#### Tásca Úsáide:

Tá Táirgí Halo deartha chun cabhrú le cóireáil créachta thoracacha trí úsáid a bhaint as gnáth-theicnící feidhmíthe gléasta a chabhraíonn le Freagróirí Sibhialtacha nó Éigeandála. Deartha chun créachta a chlúdach agus a chosaint. Ná húsáid an fheistias mar ionadú ar uaimeanna agus ar mhodhanna dúnta créachta príomhúla eile. Is táirge aonúsáide iad Halo Products. Má dhéantar iarracht ar Tháirgí Halo a athúsáid féadfar éilliú agus ionfhabhtú a thabhairt d'othar tánaisteach. Níl aon chomharthaí úsáide, sábháilteachta, riosca nó éifeachtúlachta bunaithe le haghaidh feidhmeanna iar-mháinliachta.

#### Rabhaidh:

Cinntigh go ndéanann an Halo imlíne an chréachta a shéaladh go hiomlán chun aer, leachtanna agus smionagar a chosc ó dhul isteach. Ba cheart daoine a bhfuil gortuithe chliabhraigh orthu a iompar láithreach chuig saoráid cúram sláinte nó tráma le haghaidh meastóireachta ag Cliniceoir le haghaidh iarchúraim agus cóireála. Ná cuir an séala thar fhósaí móra smionagar ionas gur féidir leis an hidrogel séala iomlán a dhéanamh.

#### Feidhmchlár:

Créachta glan agus tirim.

Bain as líneáil scaoileadh. Ná cuir ar an dromchla tánaisteach roimh é a chur i bhfeidhm chun éilliú a chosc.

Le Glóthach taobh síos, cuir os cionn lár an chréachta.

Úsáid brú éadrom - Ná stráice le linn iarratais.

Bain úsáid as róna Halo breise, má tá créachta eile i láthair.



Físeán Feidhmchlár

Othar a iompar chuig Áis Chúram Práinne le haghaidh Iarchóireála agus Meastóireachta

Déan iad a dhiúscairt tar éis úsáide, de réir na dtreoirlínte dramhaíola feiste leighis áitiúil.

#### Eolas Teagmhála:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Déan teagmháil le do thoil nó cuir in iúl don mhonaróir agus d'údarás rialála aon teagmhais thromchúiseacha maidir leis an táirge seo.

NB#  
2862



EC REP  
Obelis s.a.  
Bd. Général Wabis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0564 Irish Rev. 01



CLEAN AND  
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT  
FROM PACKAGING,  
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT  
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to  
Emergency Care Facility for  
Evaluation and Post  
Treatment

