



Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D  
Ann Arbor, MI 48108  
(800) 828-4681



info@medicaldevicesinc.com

HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C  
-30°F



Designated  
Temperature

60°C  
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if  
Package is  
Damaged or



Not  
Manufactured  
with Natural



Instructions  
Available

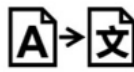

Translation  
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

#### Descrizione del prodotto:

Halo Seal e Halo XL sono costituiti da uno strato di idrogel adesivo e da uno strato di supporto adesivo non in lattice. È impermeabile ai liquidi e sigilla la ferita fino a quando il paziente non può essere trasportato in una struttura sanitaria.

#### Indicazioni per l'uso:

I prodotti Halo sono progettati per aiutare il trattamento delle ferite toraciche utilizzando tecniche di applicazione di medicazioni standard che aiutano i soccorritori civili o di emergenza. Progettato per coprire e proteggere le ferite. Non utilizzare la medicazione in sostituzione di suture e altri metodi di chiusura primaria della ferita. I prodotti Halo sono un prodotto monouso. I tentativi di riutilizzare un prodotto Halo possono introdurre contaminazione e infezione in un paziente secondario. Non sono state stabilite indicazioni di utilizzo, sicurezza, rischio o efficacia per applicazioni post-chirurgiche.

#### Avvertenze:

Assicurarsi che l'Halo sigilli completamente il perimetro della ferita per impedire l'ingresso di aria, liquidi e detriti. Le persone che hanno lesioni toraciche devono essere immediatamente trasportate in una struttura sanitaria o traumatologica per la valutazione da parte di un medico per la cura e il trattamento successivi. Non posizionare il sigillo su grandi pezzi di detriti in modo che l'idrogel possa sigillare completamente.

#### Applicazione:

Ferita pulita e asciutta.

Rimuovere dal rivestimento di rilascio. Non posizionare su una superficie secondaria prima dell'applicazione per evitare contaminazioni.

Con il gel rivolto verso il basso, posizionare sopra il centro della ferita.

Esercitare una leggera pressione - Non allungare durante l'applicazione.

Usa Sigilli Halo aggiuntivi, se sono presenti altre ferite.



Applicazione video

Trasportare il paziente in una struttura di pronto soccorso per il post-trattamento e la valutazione

Smaltire dopo l'uso, secondo le linee guida locali sui rifiuti dei dispositivi medici.

#### Informazioni sui Contatti:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Si prega di contattare o segnalare eventuali incidenti gravi relativi a questo prodotto al produttore e alle autorità di regolamentazione.

NB#  
2862

EC REP  
Obetis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0564 Italian Rev. 01



CLEAN AND  
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT  
FROM PACKAGING,  
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT  
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to  
Emergency Care Facility for  
Evaluation and Post  
Treatment

