



Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



HalochestSeals.Com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

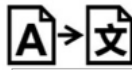

Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Descripción del Producto:

Halo Seal y Halo XL consisten en una capa adhesiva de hidrogel y una capa adhesiva de respaldo sin látex. Es impermeable a los líquidos y sella la herida hasta que el paciente pueda ser transportado a un Centro de Salud.

Indicaciones de Uso:

Los productos Halo están diseñados para ayudar en el tratamiento de heridas torácicas mediante el uso de técnicas de aplicación de apósitos estándar que ayudan a los servicios de emergencia o civiles. Diseñado para cubrir y proteger heridas. No use el apósito como reemplazo de suturas y otros métodos primarios de cierre de heridas. Los productos Halo son productos de un solo uso. Los intentos de reutilizar un producto Halo pueden generar contaminación e infección en un paciente secundario. No se establecen indicaciones de uso, seguridad, riesgo o eficacia para aplicaciones posquirúrgicas.

Advertencias:

Asegúrese de que Halo selle por completo el perímetro de la herida para evitar la entrada de aire, líquidos y desechos. Las personas que tienen lesiones torácicas deben ser transportadas de inmediato a un centro de atención médica o de traumatología para que un médico las evalúe para recibir atención y tratamiento posteriores. No coloque el sello sobre piezas grandes de escombros para que el hidrogel pueda hacer un sello completo.

Solicitud:

Herida limpia y seca.

Retire del forro de liberación. No lo coloque sobre una superficie secundaria antes de la aplicación para evitar la contaminación.

Con el lado del gel hacia abajo, colóquelo sobre el centro de la herida.

Use una presión ligera - No estire durante la aplicación.

Usa Halo Seals adicionales, si hay otras heridas presentes.



Vídeo de aplicación

Transporte del paciente al centro de atención de emergencia para el tratamiento y la evaluación posteriores

Deséchelo después de su uso, según las pautas locales de desechos de dispositivos médicos.

Información del Contacto:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Comuníquese o informe cualquier incidente grave relacionado con este producto al fabricante y a las autoridades reguladoras.

NB#
2862



EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahnis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

