



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

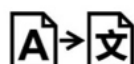

Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Popis Výrobku:

Halo Vents jsou zdravotnické prostředky, které se skládají z adhezivní hydrogelové vrstvy a adhezivní, (nelatexové) zadní vrstvy. Produkty Halo neobsahují žádné léčivé látky a nejsou vyrobeny ze zvířecích nebo lidských derivátů. Je nepropustná pro tekutiny a ránu utěsní. Produkty Halo jsou určeny k použití, dokud nebude možné pacienta převést do zdravotnického zařízení, kde budou odebrány k posouzení pacienta a následné péči.

Indikace pro Použití:

Produkty Halo jsou navrženy tak, aby napomáhaly léčbě hrudních ran pomocí standardních technik aplikace obvazů, které pomáhají civilním nebo nouzovým pracovníkům. Navrženo pro krytí a ochranu ran. Nepoužívejte krytí jako náhradu za stehy a jiné primární metody uzavření rány. Halo produkty jsou produkty na jedno použití. Pokusy o opětovné použití produktů Halo mohou způsobit kontaminaci a infekci sekundárního pacienta. Pro pooperační aplikace nejsou stanoveny žádné údaje o použití, bezpečnosti, riziku nebo účinnosti.

Upozornění:

Ujistěte se, že Halo zcela utěsní obvod rány, aby se zabránilo vniknutí vzduchu, kapalin a nečistot. Osoby, které mají poranění hrudníku, by měly být okamžitě převezeny do zdravotnického nebo traumatologického zařízení k posouzení klinikem pro následnou péči a léčbu. Nezakrývejte ventilační otvor nebo ventil předměty, jako jsou příkrývky, popruhy nebo poloha těla.

Aplikace:

Čistá a suchá rána.

Odstraňte z uvolňovací fólie. Před aplikací nepokládejte na sekundární povrch, aby nedošlo ke kontaminaci.

Gelovou stranou dolů položte na střed rány.

Použijte mírný tlak - Nenatahujte se během aplikace.

Pokud jsou přítomny další rány, použijte další Halo Seals.



Video aplikace

Transport pacienta do zařízení pohotovostní péče k následnému ošetření a vyhodnocení

Po použití zlikvidujte podle místních pokynů pro odpad ze zdravotnických prostředků.

Kontaktní informace:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Jakékoli vážné incidenty týkající se tohoto produktu kontaktujte nebo nahlaste výrobci a regulačním orgánům.

NB#
2862



EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING.
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

