



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

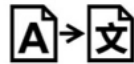

Translation Available



Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU

Produkt Beskrivelse:

Halo Vents er medicinsk udstyr, der består af et klæbende hydrogellag og et klæbende, (ikke-latex) bagsidelag. Halo-produkter indeholder ingen medicinske stoffer og er ikke konstrueret af animalske eller menneskelige derivater. Det er uigennemtrængeligt for væsker og forsegler såret. Halo-produkter er beregnet til at blive brugt, indtil patienten kan transporteres til et sundhedscenter, hvor de vil blive fjernet til patientevaluering og efterbehandling.

Indikationer for Brug:

Halo-produkter er designet til at hjælpe med behandling af thoraxsår ved at bruge standardforbindningsteknikker, der hjælper civile eller beredskabspersonale. Designet til at dække og beskytte sår. Brug ikke bandagen som erstatning for suturer og andre primære sårlukningsmetoder. Halo-produkter er et engangsprodukt. Forsøg på at genbruge et Halo-produkt kan medføre kontaminering og infektion hos en sekundær patient. Der er ikke etableret indikationer for brug, sikkerhed, risiko eller effektivitet for postkirurgiske anvendelser.

Advarsler:

Sørg for, at Halo'en forseglers sårets omkreds fuldstændigt for at forhindre, at luft, væsker og snavs trænger ind. Personer, der har thoraxskader, skal straks transporteres til et sundheds- eller traume-center for evaluering af en kliniker til efterbehandling og behandling. Bloker ikke udluftningen eller ventilen med genstande såsom tæpper, stropper eller kropsstilling.

Ansøgning:

Rent og tørt sår.

Fjern fra release liner. Må ikke placeres på sekundær overflade før påføring for at forhindre kontaminering.

Med gelsiden nedad placeres den over midten af såret.

Brug let tryk - Stræk ikke under påføring.

Brug yderligere Halo Seals, hvis andre sår er til stede.



Applikationsvideo

Transport af patient til akutmodtagelse for efterbehandling og evaluering

Bortskaf efter brug i henhold til lokale retningslinjer for affald af medicinsk udstyr.

Kontakt information:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Kontakt venligst eller rapporter alle alvorlige hændelser vedrørende dette produkt til producenten og de regulerende myndigheder.

NB# 2862



EC REP Obelis s.a. Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732. 59. 54 Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment

