



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

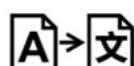

Translation
Available



[Http://www.halochestseals.com/ifu](http://www.halochestseals.com/ifu)

Productomschrijving:

Halo Vents zijn medische hulpmiddelen die bestaan uit een zelfklevende hydrogellaag en een zelfklevende, (niet-latex) ruglaag. Halo-producten bevatten geen medicinale stoffen en zijn niet gemaakt van dierlijke of menselijke derivaten. Het is ondoordringbaar voor vloeistoffen en sluit de wond af. Halo-producten zijn bedoeld om te worden gebruikt totdat de patiënt naar een zorginstelling kan worden vervoerd, waar ze worden verwijderd voor patiëntevaluatie en nazorg.

Indicaties voor Gebruik:

Halo-producten zijn ontworpen om te helpen bij de behandeling van thoracale wonden door gebruik te maken van standaard technieken voor het aanbrengen van verbanden die hulp bieden aan burgers of hulpdiensten. Ontworpen om wonden te bedekken en te beschermen. Gebruik het verband niet ter vervanging van hechtingen en andere methoden voor primaire wondsluiting. Halo-producten zijn producten voor eenmalig gebruik. Pogingen om Halo-producten opnieuw te gebruiken, kunnen besmetting en infectie bij een secundaire patiënt veroorzaken. Er zijn geen aanwijzingen voor gebruik, veiligheid, risico of werkzaamheid vastgesteld voor postoperatieve toepassingen.

Waarschuwingen:

Zorg ervoor dat de Halo de omtrek van de wond volledig afdicht om te voorkomen dat lucht, vloeistoffen en vuil binnendringen. Personen met thoracale letsels moeten onmiddellijk worden vervoerd naar een gezondheidszorg- of traumacentrum voor evaluatie door een arts voor nazorg en behandeling. Blokkeer de ontluftung of het ventiel niet door voorwerpen zoals dekens, riemen of lichaamshouding.

Sollicitatie:

Schone en droge wond.

Verwijderen uit release liner. Voor het aanbrengen niet op een secundair oppervlak plaatsen om besmetting te voorkomen.

Leg met de gelzijde naar beneden over het midden van de wond.

Oefen lichte druk uit - Rek niet uit tijdens het aanbrengen.

Gebruik extra Halo Seals als er andere wonden aanwezig zijn.



Toepassingsvideo

Vervoer de patiënt naar de spoedeisende hulp voor nabehandeling en evaluatie

Na gebruik weggooien volgens de lokale afvalrichtlijnen voor medische hulpmiddelen.

Contactgegevens:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Neem contact op met of meld eventuele ernstige incidenten met betrekking tot dit product aan de fabrikant en regelgevende instanties.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wabis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

