



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

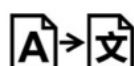

Translation Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Tootekirjeldus:

Halo Ventid on meditsiiniseadmed, mis koosnevad kleepuvast hüdrogeelikihist ja kleepuvast (mittelateksist) aluskihist. Halo tooted ei sisalda mingeid raviaineid ega ole valmistatud loomsetest või inimestest saadud saadustest. See on vedelikku mitteläbilaskev ja tihendab haava. Halo tooted on ette nähtud kasutamiseks seni, kuni patsient saab transportida tervishoiuasutusse, kust need patsiendi hindamiseks ja järelhoolduseks eemaldatakse.

Kasutamise Näidustused:

Halo tooted on loodud rindkerehaavade ravi hõlbustamiseks, kasutades standardseid sidumistehnikaid, mis aitavad tsiviil- või hädaabireageerijaid. Mõeldud haavade katmiseks ja kaitsmiseks. Ärge kasutage sidet õmbluste ja muude esmaste haava sulgemismeetodite asendajana. Halo tooted on ühekordselt kasutatavad tooted. Halo toodete korduvkasutamise katsed võivad sekundaarsele patsiendile põhjustada saastumist ja infektsiooni. Operatsioonijärgsete rakenduste puhul ei ole kasutus-, ohutus-, riski- või efektiivsusnäitajaid kindlaks tehtud.

Hoiatused:

Veenduge, et Halo tihendab täielikult haava perimeetri, et vältida õhu, vedelike ja prahi sisenemist. Inimesed, kellel on rindkere vigastus, tuleb viivitamatult transportida tervishoiu- või traumaasutusse, et arst hindaks neid järelhoolduse ja ravi saamiseks. Ärge blokeerige ventilatsiooniava ega ventiili selliste esemetega nagu tekid, rihmad või kehaasend.

Rakendus:

Puhas ja kuiv haav.

Eemaldage kaitsekattelt. Saastumise vältimiseks ärge asetage sekundaarsele pinnale enne pealekandmist.

Asetage geelipool allapoole haava keskpunkti.

Kasutage kergest survet – ärge venitage pealekandmise ajal.

Kasutage täiendavaid halo tihendeid, kui on muid haavu.



Rakenduse video

Patsiendi transportimine kiirabiasutusse järelraviks ja hindamiseks

Kõrvaldage pärast kasutamist vastavalt kohalikele meditsiiniseadmete jäätmejuhistele.

Kontaktinfo:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Võtke ühendust või teatage kõigist selle tootega seotud tõsisest juhtumitest tootjale ja reguleerivatele asutustele.

NB#
2862



EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 69. 54
Fax: +(32) 2. 732. 69. 03

MAW - 0563 Estonian Rev. 01



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment

