



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

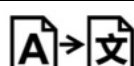

Translation
Available



Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU

Produktbeschreibung:

Halo Vents sind Medizinprodukte, die aus einer haftenden Hydrogelschicht und einer haftenden (latexfreien) Trägerschicht bestehen. Halo-Produkte enthalten keine medizinischen Substanzen und sind nicht aus tierischen oder menschlichen Derivaten hergestellt. Es ist flüssigkeitsundurchlässig und dichtet die Wunde ab. Halo-Produkte sind für die Verwendung vorgesehen, bis der Patient zu einer Gesundheitseinrichtung transportiert werden kann, wo sie zur Beurteilung des Patienten und zur Nachsorge entfernt werden.

Hinweise zur Verwendung:

Halo-Produkte wurden entwickelt, um die Behandlung von Brustwunden zu unterstützen, indem Standardtechniken zum Anlegen von Verbänden verwendet werden, die Zivilisten oder Rettungskräften helfen. Entwickelt, um Wunden abzudecken und zu schützen. Verwenden Sie den Verband nicht als Ersatz für Nähte und andere primäre Wundverschlussmethoden. Halo-Produkte sind Einwegprodukte. Versuche, ein Halo-Produkt wiederzuverwenden, können bei einem sekundären Patienten eine Kontamination und Infektion hervorrufen. Für postoperative Anwendungen liegen keine Hinweise auf Verwendung, Sicherheit, Risiko oder Wirksamkeit vor.

Warnungen:

Stellen Sie sicher, dass der Halo den Umfang der Wunde vollständig abdichtet, um das Eindringen von Luft, Flüssigkeiten und Fremdkörpern zu verhindern. Personen mit Thoraxverletzungen sollten zur Nachsorge und Behandlung sofort zu einer medizinischen oder traumatischen Einrichtung gebracht werden, um von einem Kliniker untersucht zu werden. Blockieren Sie die Entlüftung oder das Ventil nicht durch Gegenstände wie Decken, Gurte oder Körperhaltung.

Anwendung:

Saubere und trockene Wunde

Von Trennfolie entfernen. Vor dem Auftragen nicht auf die sekundäre Oberfläche legen, um eine Kontamination zu vermeiden.

Mit der Gelseite nach unten über die Mitte der Wunde legen.

Üben Sie leichten Druck aus - Dehnen Sie sich während der Anwendung nicht.

Verwenden Sie zusätzliche Halo Seals, wenn andere Wunden vorhanden sind.



Anwendungsvideo

Transportieren Sie den Patienten zur Nachbehandlung und Bewertung in eine Notfallversorgungseinrichtung

Entsorgen Sie es nach Gebrauch gemäß den örtlichen Abfallrichtlinien für medizinische Geräte.

Kontaktinformationen:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Bitte wenden Sie sich an den Hersteller und die Aufsichtsbehörde oder melden Sie schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit diesem Produkt.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahnis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

