

HALO VENT

HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated
Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

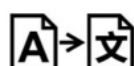

Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Περιγραφή προϊόντος:

Οι αεραγωγοί Halo είναι ιατρικές συσκευές που αποτελούνται από ένα συγκολλητικό στρώμα υδρογέλης και ένα συγκολλητικό, (μη λατέξ) στρώμα υποστήριξης. Τα προϊόντα Halo δεν περιέχουν καμία φαρμακευτική ουσία και δεν είναι κατασκευασμένα από ζωικά ή ανθρώπινα παράγωγα. Είναι αδιαπέραστο από υγρά και σφραγίζει την πληγή. Τα προϊόντα Halo προορίζονται να χρησιμοποιούνται έως ότου ο ασθενής μπορεί να μεταφερθεί σε μια μονάδα υγειονομικής περίθαλψης όπου θα αφαιρεθούν για αξιολόγηση του ασθενούς και μετέπειτα φροντίδα.

Ενδείξεις χρήσης:

Τα προϊόντα Halo έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη θεραπεία τραυμάτων του θώρακα χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές εφαρμογής επίδεσμου που βοηθούν τους πολίτες ή τους ανταποκριτές έκτακτης ανάγκης. Σχεδιασμένο να καλύπτει και να προστατεύει τις πληγές. Μην χρησιμοποιείτε τον επίδεσμο ως υποκατάστατο για ράμματα και άλλες πρωτογενείς μεθόδους κλεισίματος πληγών. Τα προϊόντα Halo είναι ένα προϊόν μίας χρήσης. Οι προσπάθειες επαναχρησιμοποίησης προϊόντων Halo ενδέχεται να προκαλέσουν μόλυνση και μόλυνση σε δευτερεύοντα ασθενή. Δεν υπάρχουν ενδείξεις χρήσης, ασφάλειας, κινδύνου ή αποτελεσματικότητας για μετεγχειρητικές εφαρμογές.

Προειδοποιήσεις:

Βεβαιωθείτε ότι το Halo σφραγίζει πλήρως την περίμετρο του τραύματος για να αποτρέψει την είσοδο αέρα, υγρών και υπολειμμάτων. Ατομα που έχουν θωρακικό τραύμα θα πρέπει να μεταφέρονται αμέσως σε μονάδα υγειονομικής περίθαλψης ή τραύματος για αξιολόγηση από κλινικό ιατρό για μετέπειτα φροντίδα και θεραπεία. Μην φράζετε τον εξαερισμό ή τη βαλβίδα με αντικείμενα όπως κουβέρτες, μάντες ή θέση σώματος.

Εφαρμογή:

Καθαρή και στεγνή πληγή.

Αφαιρέστε από την επένδυση απελευθέρωσης. Μην τοποθετείτε σε δευτερεύουσα επιφάνεια πριν την εφαρμογή για να αποφύγετε τη μόλυνση.

Με την πλευρά του Gel προς τα κάτω, τοποθετήστε το πάνω από το κέντρο της πληγής.

Χρησιμοποιήστε ελαφριά πίεση - Μην τεντώνετε κατά την εφαρμογή.

Χρησιμοποιήστε επιπλέον Halo Seals, εάν υπάρχουν άλλα τραύματα.



Βίντεο εφαρμογής

Μεταφορά ασθενούς σε Μονάδα Επείγουσας Φροντίδας για Μετά τη Θεραπεία και Αξιολόγηση

Απορρίψτε μετά τη χρήση, σύμφωνα με τις τοπικές οδηγίες για τα απόβλητα ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Στοιχεία επικοινωνίας:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Επικοινωνήστε ή αναφέρετε τυχόν σοβαρά περιστατικά σχετικά με αυτό το προϊόν στον κατασκευαστή και στις ρυθμιστικές αρχές.

NB#
2862



EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wabis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0563 Greek Rev. 01



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING.
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

