

# HALO VENT™

HalochestSeals.Com

## MDI

Medical Devices, Inc.  
4401 Varsity Dr Suite D  
Ann Arbor, MI 48108  
(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C  
-30°F



Designated  
Temperature

60°C  
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if  
Package is  
Damaged or



Not  
Manufactured  
with Natural



Instructions  
Available

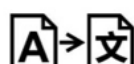

Translation  
Available



[Http://www.halochestseals.com/ifu](http://www.halochestseals.com/ifu)

#### Termékleírás:

A Halo Vents olyan orvosi eszközök, amelyek egy öntapadó hidrogél rétegből és egy ragasztó, (nem latex) hátlapból állnak. A Halo termékek nem tartalmaznak gyógyászati anyagokat, és nem állati vagy emberi származékokból készültek. Folyadékot át nem eresztő és lezárja a sebet. A Halo termékeket addig kell használni, amíg a beteget el nem szállítják egy egészségügyi intézménybe, ahol eltávolítják őket a betegértékelés és az utógondozás céljából.

#### Használati Javallatok:

A Halo termékeket úgy tervezték, hogy segítsék a mellkasi sebek kezelését olyan szabványos kötözési technikák alkalmazásával, amelyek segítik a polgári vagy sürgősségi reagálókat. Sebek fedezésére és védelmére tervezték. Ne használja a kötést varratok és más elsődleges sebzárás módszerek helyettesítésére. A Halo Products egyszer használatos termék. A Halo termékek újrafelhasználására tett kísérletek szennyeződést és fertőzést okozhatnak egy másodlagos páciensben. Nincsenek utalások a használat, a biztonságosság, a kockázat vagy a hatékonyság tekintetében a műtét utáni alkalmazásokhoz.

#### Figyelmeztetések:

Győződjön meg arról, hogy a Halo teljesen lezárja a seb kerületét, hogy megakadályozza a levegő, folyadékok és törmelék bejutását. A mellkasi sérülést szenvedett személyeket azonnal egészségügyi vagy traumatológiai intézménybe kell szállítani, ahol a klinikus értékeli az utógondozás és kezelés céljából. Ne takarja el a szellőzőnyílást vagy a szelepet olyan tárgyakkal, mint például takarók, hevederek vagy testhelyzet.

#### Alkalmazás:

Tiszta és száraz seb.

Távolítsa el a lehúzható fóliáról. Felhordás előtt ne helyezze másodlagos felületre a szennyeződés elkerülése érdekében.

A gél oldalával lefelé helyezze a seb közepére.

Használjon enyhe nyomást - Ne nyújtsa az alkalmazás során.

Használjon további Halo Sealeket, ha más sebek vannak jelen.



Alkalmazási videó

Beteg szállítása a sürgősségi ellátó intézménybe utókezelés és értékelés céljából

Használat után ártalmatlanítsa az orvosi eszközök hulladékára vonatkozó helyi irányelvek szerint.

#### Elérhetőség:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval és a szabályozó hatóságokkal, vagy jelentse a termékkel kapcsolatos súlyos eseményeket.

NB#  
2862

EC REP  
Obelis s.a.  
Bd. Général Wabis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0563 Hungarian Rev. 01



CLEAN AND  
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT  
FROM PACKAGING.  
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT  
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to  
Emergency Care Facility for  
Evaluation and Post  
Treatment

