



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

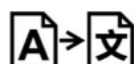

Translation Available



[Http://www.halochestseals.com/ifu](http://www.halochestseals.com/ifu)

Vörulýsing:

Halo Vents eru lækningatæki sem samanstanda af límandi hýdrogellagi og límandi, (ekki latex) baklagi. Halo vörurnar innihalda engin lyf og eru ekki gerðar úr dýra- eða mannaafleiðum. Það er ógegndræpt fyrir vökva og þéttir sárið. Halo vörurnar eru ætlaðar til notkunar þar til hægt er að flytja sjúklinginn á heilsugæslustöð þar sem þær verða fjarlægðar fyrir mat á sjúklingi og eftir umönnun.

Ábendingar um Notkun:

Halo vörurnar eru hannaðar til að aðstoða við meðhöndlun á brjóstholssárum með því að nota staðlaða umbúðaáðferðir sem aðstoða borgaralega eða neyðarviðbragðsaðila. Hannað til að hylja og vernda sár. Ekki nota umbúðirnar í staðinn fyrir sauma og aðrar áðferðir til að loka sárum. Halo vörur eru einnota vara. Tílaunir til að endurnýta Halo vörur geta leitt til mengunar og sýkingar hjá aukasjúklingi. Engar vísbendingar um notkun, öryggi, áhættu eða verkun eru staðfestar fyrir notkun eftir skurðaðgerð.

Víðvaranir:

Gakktu úr skugga um að Halo loki alveg jaðri sársins til að koma í veg fyrir að loft, vökvar og rusl komist inn. Einstaklingar sem eru með áverka á brjóstkassa ættu að vera tafarlaust fluttir á heilsugæslu eða áfallahjálpi til að meta af lækni til aðhlýnningar og meðferðar. Ekki loka fyrir loftopið eða lokann með hlutum eins og teppum, ólum eða líkamsstöðu.

Umsókn:

Hreint og þurrt sár.

Fjarlægðu af losunarfóðrinu. Ekki setja á annað yfirborð áður en það er borið á til að koma í veg fyrir mengun.

Með hlauphlíðinni niður, settu yfir miðju sársins.

Notaðu léttan þrýsting - Ekki teygja þig meðan á notkun stendur.

Notaðu auka Halo Seals ef önnur sár eru til staðar.

Flytja sjúkling á bráðamóttöku fyrir eftirmeðferð og mat

Fargaðu eftir notkun, samkvæmt staðbundnum leiðbeiningum um úrgang lækningatækja.

Samskiptaupplýsingar:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Vinsamlegast hafðu samband við eða tilkynntu öll alvarleg atvik varðandi þessa vöru til framleiðanda og eftirlitsfirvalda.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0563 Icelandic Rev. 01



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

