



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

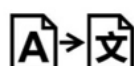

Translation Available



Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU

Cur Síos ar an Táirge:

Feistí leighis is ea Halo Vents atá comhdhéanta de shraith ghreamaitheacha hidrogel agus de chiseal taca ghreamaitheacha (neamh-latex). Níl aon substaintí focshláinte ag Táirgí Halo agus ní dhéantar iad de dhíorthaigh ainmhithe nó daonna. Tá sé neamh-thréscaoilteach do leachtanna agus rónta an fhoirceannadh. Tá Táirgí Halo beartaithe le húsáid go dtí gur féidir an t-othar a iompar chuig Áis Cúraim Sláinte áit a mbainfear amach iad le haghaidh meastóireachta othar agus iarchúraim.

Tásca Úsáide:

Tá Táirgí Halo deartha chun cabhrú le cóireáil créachta thoracacha trí úsáid a bhaint as gnáth-theicnící feidhmithe gléasta a chabhraíonn le Freagróirí Sibhialtacha nó Éigeandála. Deartha chun créachta a chlúdach agus a chosaint. Ná húsáid an fheistean mar ionadú ar uaimheanna agus ar mhodhanna dúnta créachta príomhúla eile. Is táirge aonúsáide iad Halo Products. Má dhéantar iarracht ar Tháirgí Halo a athúsáid féadfar éilliú agus ionfhabhtú a thabhairt d'othar tánaisteach. Níl aon chomharthaí úsáide, sábháilteachta, riosca nó éifeachtúlachta bunaithe le haghaidh feidhmeanna iar-mháinliachta.

Rabhadh:

Cinntigh go ndéanann an Halo imlíne an chréachta a shéaladh go hiomlán chun aer, leachtanna agus smionagar a chosc ó dhul isteach. Ba cheart daoine a bhfuil gortuithe chliabhraigh orthu a iompar láithreach chuig saoráid cúram sláinte nó tráma le haghaidh meastóireachta ag Cliniceoir le haghaidh iarchúraim agus cóireála. Ná bac leis an vent nó an comhla ag míreanna ar nós pluideanna, strapai, nó suíomh coirp.

Feidhmchlár:

Créachta glan agus tirim.

Bain as líneáil scaoileadh. Ná cuir ar an dromchla tánaisteach roimh é a chur i bhfeidhm chun éilliú a chosc.

Le Glóthach taobh síos, cuir os cionn lár an chréachta.

Úsáid brú éadrom - Ná stráice le linn iarratais.

Bain úsáid as rónta Halo breise, má tá créachta eile i láthair.



Físeán Feidhmchlár

Othar a iompar chuig Áis Chúram Práinne le haghaidh iarchóireála agus Meastóireachta

Déan iad a dhiúscairt tar éis úsáide, de réir na dtreoirínte dramhaíola feiste leighis áitiúil.

Eolas Teagmhála:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Déan teagmháil le do thoil nó cuir in iúl don mhonaróir agus d'údaráis rialála aon teagmhais thromchúiseacha maidir leis an táirge seo.

NB# 2862

EC REP Obelis s.a. Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732. 59. 54 Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0563 Irish Rev. 01



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment

