



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

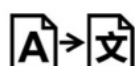

Translation Available



Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU

Deskrizzjoni Tal-prodott:

Halo Vents huma apparati mediċi li jikkonsistu f'saff ta' idroġel li jwahaal u saff ta' rinforz adeziv (mhux tal-latex). Il-Prodotti Halo ma fihom l-ebda sustanza mediċinali u mhumiex mibnija minn derivattivi mill-animali jew umani.

Indikazzjonijiet Għall-Użu:

Il-Prodotti Halo huma ddisinjati biex jgħinu fit-trattament tal-feriti toraċi billi jużaw tekniki standard ta' applikazzjoni ta' dressing li jgħinu lil Ċivili jew lir-Rispondenti ta' Emergenza.

Twissijiet:

Kun żgur li l-Halo jissigilla kompletament il-perimetru tal-ferita biex tevita li jidhlu arja, likwidi u debris. Persuni li għandhom griehi toraċi għandhom jiġu ttrasportati immedjatament lejn faċilità tal-kura tas-saħha jew tat-trauma għal evalwazzjoni minn Klinika għall-kura u t-trattament ta' wara.

Applikazzjoni:

- Ferita nadifa u niexfa.
Nehhi mill-inforra tar-rilaxx. Tpoġġix fuq wiċċ sekondarju qabel l-applikazzjoni biex tevita l-kontaminazzjoni.
Bil-ġenb tal-Ġel 'l isfel, poġġi fuq iċ-ċentru tal-ferita.
Uża pressjoni hafifa - Tistirax waqt l-applikazzjoni.
Uża Halo Sigillli addizzjonali, jekk feriti oħra jkunu preżenti.



Applikazzjoni Video

Trasport tal-Pazjent lejn Faċilità ta' Kura ta' Emergenza għal Post Trattament u Evalwazzjoni

Armi wara l-użu, skont il-linji gwida tal-iskart tal-apparat mediku lokali.

Detalji ta' Kuntatt:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Jekk jogħġbok ikkuntattja jew irrapporta kwalunkwe incident serju dwar dan il-prodott lill-manifattur u lill-awtoritajiet regolatorji.

NB# 2862

EC REP Obelis s.a. Bd. Général Wahis 53 1030 Brussels, Belgium

Vertical instruction panel with icons: CLEAN AND DRY WOUND, REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE, Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment.