



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

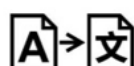

Translation Available



[Http://www.halochestseals.com/ifu](http://www.halochestseals.com/ifu)

Produktbeskrivelse:

Halo Vents er medisinsk utstyr som består av et klebende hydrogellag og et klebende (ikke-latex) baksidelag. Halo-produkter inneholder ingen medisinske stoffer og er ikke laget av animalske eller menneskelige derivater. Den er ugjennomtrengelig for væsker og forseglar såret. Halo-produkter er ment å brukes til pasienten kan transporteres til et helseinstitusjon hvor de vil bli fjernet for pasientevaluering og etterbehandling.

Indikasjoner for Bruk:

Halo-produkter er utviklet for å hjelpe til med behandling av thoraxsår ved å bruke standard påføringsteknikker for bandasje som hjelper sivile eller beredskapspersonell. Designet for å dekke og beskytte sår. Ikke bruk bandasjen som erstatning for suturer og andre primære sårlukkingsmetoder. Halo-produkter er et engangsprodukt. Forsøk på å gjenbruke et Halo-produkt kan introdusere kontaminering og infeksjon til en sekundær pasient. Ingen indikasjoner på bruk, sikkerhet, risiko eller effekt er etablert for postkirurgiske applikasjoner.

Advarsler:

Sørg for at Haloen forseglar sårets omkrets fullstendig for å forhindre at luft, væsker og rusk kommer inn. Personer som har thoraxskader bør umiddelbart transporteres til et helse- eller traumesenter for evaluering av en kliniker for etterbehandling og behandling. Ikke blokker ventilen eller ventilen med gjenstander som tepper, stropper eller kroppsstilling.

Applikasjon:

- Rent og tørt sår.
- Fjern fra utløserforingen. Ikke plasser på sekundær overflate før påføring for å forhindre kontaminering.
- Med gelsiden ned, plasser over midten av såret.
- Bruk lett trykk - Ikke strekk under påføring.
- Bruk ekstra Halo Seals hvis andre sår er tilstede.



Applikasjonsvideo

Transport pasienten til akuttmottaket for etterbehandling og evaluering

Kast etter bruk i henhold til lokale retningslinjer for avfall av medisinsk utstyr.

Kontaktinformasjon:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Vennligst kontakt eller rapporter eventuelle alvorlige hendelser angående dette produktet til produsenten og tilsynsmyndighetene.

NB#
2862



EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

CLEAN AND DRY WOUND

REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER

APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE

Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment