



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.  
4401 Varsity Dr Suite D  
Ann Arbor, MI 48108  
(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C  
-30°F



Designated  
Temperature

60°C  
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if  
Package is  
Damaged or



Not  
Manufactured  
with Natural



Instructions  
Available

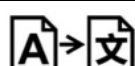

Translation  
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

#### Opis Produktu:

Halo Vents to urządzenia medyczne, które składają się z samoprzylepnej warstwy hydrożelowej i samoprzylepnej (nielateksowej) warstwy spodniej. Produkty Halo nie zawierają żadnych substancji leczniczych i nie są zbudowane z produktów pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Jest nieprzepuszczalny dla płynów i uszczelnia ranę. Produkty Halo są przeznaczone do użytku, dopóki pacjent nie będzie mógł zostać przetransportowany do Placówki opieki zdrowotnej, gdzie zostaną usunięte w celu oceny pacjenta i opieki pooperacyjnej.

#### Wskazania do Stosowania:

Produkty Halo zostały zaprojektowane, aby wspomagać leczenie ran klatki piersiowej przy użyciu standardowych technik nakładania opatrunków, które pomagają cywilom lub ratownikom. Przeznaczone do zakrywania i ochrony ran. Nie należy stosować opatrunku jako zamiennika szwów i innych pierwotnych metod zamykania ran. Produkty Halo to produkty jednorazowego użytku. Próby ponownego użycia produktów Halo mogą spowodować skażenie i zakażenie drugiego pacjenta. Nie ustalono żadnych wskazań dotyczących stosowania, bezpieczeństwa, ryzyka ani skuteczności w zastosowaniach pooperacyjnych.

#### Ostrzeżenia:

Upewnij się, że Halo całkowicie uszczelnia obwód rany, aby zapobiec przedostawaniu się powietrza, płynów i zanieczyszczeń. Osoby z urazami klatki piersiowej powinny zostać natychmiast przetransportowane do ośrodka opieki zdrowotnej lub ośrodka urazowego w celu oceny przez klinicystę w celu dalszej opieki i leczenia. Nie blokuj odpowietrznika ani zaworu przedmiotami, takimi jak koce, paski lub pozycja ciała.

#### Podanie:

Rana czysta i sucha.

Wymij z wkładki zabezpieczającej. Nie kłaść na wtórnej powierzchni przed nałożeniem, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

Żelową stroną do dołu umieść na środku rany.

Użyj lekkiego nacisku - Nie rozciągaj podczas aplikacji.

Użyj dodatkowych Pieczęci Halo, jeśli obecne są inne rany.



Wideo aplikacji

Przetransportuj pacjenta do ośrodka opieki w nagłych wypadkach w celu dalszego leczenia i oceny

Utylizować po użyciu zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów urządzeń medycznych.

#### Informacje Kontaktowe:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Prosimy o kontakt lub zgłaszanie wszelkich poważnych incydentów dotyczących tego produktu producentowi i organom regulacyjnym.

NB#  
2862

EC REP  
Obelis s.a.  
Bd. Général Wabis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND  
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT  
FROM PACKAGING,  
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT  
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to  
Emergency Care Facility for  
Evaluation and Post  
Treatment

