



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

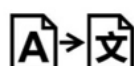

Translation
Available



[Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU](http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU)

Descrição do Produto:

Halo Vents são dispositivos médicos que consistem em uma camada adesiva de hidrogel e uma camada de suporte adesiva (sem látex). Os Produtos Halo não contêm quaisquer substâncias medicinais e não são construídos a partir de derivados animais ou humanos. É impermeável a líquidos e sela a ferida. Os produtos Halo destinam-se a ser usados até que o paciente possa ser transportado para uma unidade de saúde, onde serão removidos para avaliação do paciente e cuidados posteriores.

Indicações de Uso:

Os produtos Halo são projetados para auxiliar no tratamento de feridas torácicas usando técnicas de aplicação de curativos padrão que auxiliam os socorristas civis ou de emergência. Projetado para cobrir e proteger feridas. Não use o curativo como substituto de suturas e outros métodos primários de fechamento de feridas. Os Produtos Halo são produtos de uso único. Tentativas de reutilizar produtos Halo podem introduzir contaminação e infecção em um paciente secundário. Nenhuma indicação de uso, segurança, risco ou eficácia é estabelecida para aplicações pós-cirúrgicas.

Avisos:

Certifique-se de que o Halo sela completamente o perímetro da ferida para evitar a entrada de ar, líquidos e detritos. As pessoas com lesões torácicas devem ser imediatamente transportadas para uma unidade de saúde ou trauma para avaliação por um clínico para cuidados e tratamento pós-trauma. Não bloqueie a ventilação ou a válvula com itens como cobertores, correias ou a posição do corpo.

Inscrição:

Ferida limpa e seca.

Remova do forro de liberação. Não coloque na superfície secundária antes da aplicação para evitar contaminação.

Com o Gel voltado para baixo, coloque sobre o centro da ferida.

Use leve pressão - Não estique durante a aplicação.

Use Halo Seals adicionais, se outras feridas estiverem presentes.



Vídeo de Aplicação

Transportar paciente para unidade de atendimento de emergência para pós-tratamento e avaliação

Descarte após o uso, de acordo com as diretrizes locais de resíduos de dispositivos médicos.

Informações de contato:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Entre em contato ou relate quaisquer incidentes graves relacionados a este produto ao fabricante e às autoridades reguladoras.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahnis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0563 Portuguese Rev. 01



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

