

HALO VENT

HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.

4401 Varsity Dr Suite D

Ann Arbor, MI 48108

(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

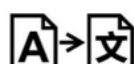

Translation
Available



[Http://www.halochestseals.com/ifu](http://www.halochestseals.com/ifu)

Descriere Produs:

Halo Vents sunt dispozitive medicale care constau dintr-un strat de hidrogel adeziv și un strat de suport adeziv (fără latex). Produsele Halo nu conțin substanțe medicinale și nu sunt construite din derivate animale sau umane. Este impermeabil la lichide și etanșează rana. Produsele Halo sunt destinate să fie utilizate până când pacientul poate fi transportat la o unitate de îngrijire medicală de unde vor fi îndepărtate pentru evaluarea pacientului și îngrijirea ulterioară.

Indicații de Utilizare:

Produsele Halo sunt concepute pentru a ajuta la tratarea rănilor toracice prin utilizarea tehnicilor standard de aplicare a pansamentului care ajută civilii sau cei care au intervenție în situații de urgență. Conceput pentru a acoperi și proteja rănilile. Nu utilizați pansamentul ca înlocuitor pentru suturile și alte metode primare de închidere a plăgii. Produsele Halo sunt produse de unică folosință. Încercările de reutilizare a unui produs Halo pot introduce contaminare și infecție la un pacient secundar. Nu sunt stabilite indicații de utilizare, siguranță, risc sau eficacitate pentru aplicațiile postoperatorii.

Avertizări:

Asigurați-vă că Halo etanșează complet perimetrul rănilor pentru a preveni intrarea aerului, a lichidelor și a resturilor. Persoanele care au leziuni toracice trebuie transportate imediat la o unitate de asistență medicală sau de traumatologie pentru evaluare de către un clinician pentru îngrijire și tratament post. Nu blocați orificiul de ventilație sau supapa cu obiecte precum pățuri, curele sau poziția corpului.

Aplicație:

Rană curată și uscată.

Scoateți de pe căptușeala de eliberare. Nu așezați pe suprafața secundară înainte de aplicare pentru a preveni contaminarea.

Cu gelul în jos, puneți-l peste centrul rănilor.

Folosiți o presiune ușoară - Nu vă întindeți în timpul aplicării.

Folosiți sigiliile Halo suplimentare, dacă sunt prezente și alte răni.



Video cu aplicație

Transportați pacientul la unitatea de îngrijire de urgență pentru post-tratament și evaluare

Aruncați după utilizare, conform recomandărilor locale privind deșeurile de dispozitive medicale.

Informații de Contact:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Vă rugăm să contactați sau să raportați orice incident grav legat de acest produs producătorului și autorităților de reglementare.

NB#
2862

EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahnis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0563 Romanian Rev. 01



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

