

HALO VENT™

HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681

info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C
-30°F



Designated
Temperature

60°C
140°F



Not Sterilized




Do Not Use if
Package is
Damaged or



Not
Manufactured
with Natural



Instructions
Available

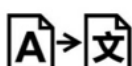

Translation
Available



[Http://www.halochestseals.com/ifu](http://www.halochestseals.com/ifu)

Opis Izdelka:

Halo Vents so medicinski pripomočki, ki so sestavljeni iz adhezivne hidrogelne plasti in adhezivne (brez lateksa) hrbtne plasti. Izdelki Halo ne vsebujejo nobenih zdravilnih učinkovin in niso izdelani iz živalskih ali človeških derivatov. Je neprepusten za tekočine in tesni rano. Izdelki Halo so namenjeni uporabi, dokler pacienta ni mogoče prepeljati v zdravstveno ustanovo, kjer jih bodo odstranili za oceno pacienta in po oskrbi.

Indikacije za Uporabo:

Izdelki Halo so zasnovani za pomoč pri zdravljenju torakalnih ran z uporabo standardnih tehnik nanašanja oblog, ki pomagajo civilnim reševalcem ali reševalcem v sili. Zasnovan za pokrivanje in zaščito ran. Obloge ne uporabljajte kot nadomestilo za šive in druge metode primarnega zapiranja ran. Izdelki Halo so izdelki za enkratno uporabo. Poskusi ponovne uporabe izdelkov Halo lahko povzročijo kontaminacijo in okužbo sekundarnega bolnika. Za uporabo po kirurških posegih ni nobenih znakov uporabe, varnosti, tveganja ali učinkovitosti.

Opozorila:

Zagotovite, da Halo popolnoma zapre obod rane, da preprečite vstop zraka, tekočin in drobirja. Osebe, ki imajo poškodbe prsnega koša, je treba nemudoma prepeljati v zdravstveno ustanovo ali ustanovo za travme, da jih oceni zdravnik za nadaljnjo oskrbo in zdravljenje. Ne blokirajte zračnika ali ventila s predmeti, kot so odeje, trakovi ali položaj telesa.

Uporaba:

Čista in suha rana.

Odstranite iz sprostitvene obloge. Ne postavljajte na sekundarno površino pred nanosom, da preprečite kontaminacijo.

S stranjo z gelom navzdol, položite na sredino rane.

Uporabite lahek pritisk - Med nanašanjem se ne raztegujte.

Uporabite dodatne Halo tesnila, če so prisotne druge rane.



video aplikacije

Prevoz pacienta v ustanovo za nujno oskrbo za naknadno zdravljenje in oceno

Po uporabi zavrzite v skladu z lokalnimi smernicami za odpadke iz medicinskih pripomočkov.

Kontaktni Podatki:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.

Obrnite se na proizvajalca in regulativne organe ali jih obvestite o morebitnih resnih dogodkih v zvezi s tem izdelkom.

NB#
2862



EC REP
Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

MAW - 0563 Slovenian Rev. 01



CLEAN AND
DRY WOUND



REMOVE PRODUCT
FROM PACKAGING,
REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT
WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to
Emergency Care Facility for
Evaluation and Post
Treatment

