



HalochestSeals.Com

MDI

Medical Devices, Inc.
4401 Varsity Dr Suite D
Ann Arbor, MI 48108
(800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



Medical Device



Do Not

-34°C

-30°F



Designated Temperature

60°C

140°F



Not Sterilized




Do Not Use if Package is Damaged or



Not Manufactured with Natural



Instructions Available

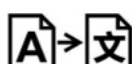

Translation Available



Http://WWW.HALOCHESTSEALS.com/IFU

Descripción del Producto:

Los Halo Vents son dispositivos médicos que constan de una capa adhesiva de hidrogel y una capa adhesiva de respaldo (que no es de látex). Los productos Halo no contienen ninguna sustancia medicinal y no están elaborados a partir de derivados animales o humanos. Es impermeable a los líquidos y sella la herida. Los productos Halo están destinados a usarse hasta que el paciente pueda ser transportado a un centro de atención médica donde se retirarán para la evaluación del paciente y la atención posterior.

Indicaciones de Uso:

Los productos Halo están diseñados para ayudar en el tratamiento de heridas torácicas mediante el uso de técnicas de aplicación de apósitos estándar que ayudan a los servicios de emergencia o civiles. Diseñado para cubrir y proteger heridas. No use el apósito como reemplazo de suturas y otros métodos primarios de cierre de heridas. Los productos Halo son productos de un solo uso. Los intentos de reutilizar un producto Halo pueden generar contaminación e infección en un paciente secundario. No se establecen indicaciones de uso, seguridad, riesgo o eficacia para aplicaciones posquirúrgicas.

Advertencias:

Asegúrese de que Halo selle por completo el perímetro de la herida para evitar la entrada de aire, líquidos y desechos. Las personas que tienen lesiones torácicas deben ser transportadas de inmediato a un centro de atención médica o de traumatología para que un médico las evalúe para recibir atención y tratamiento posteriores. No bloquee el respiradero o la válvula con elementos como mantas, correas o la posición del cuerpo.

Solicitud:

Herida limpia y seca.

Retire del forro de liberación. No lo coloque sobre una superficie secundaria antes de la aplicación para evitar la contaminación.

Con el lado del gel hacia abajo, colóquelo sobre el centro de la herida.

Use una presión ligera - No estire durante la aplicación.

Usa Halo Seals adicionales, si hay otras heridas presentes.



Vídeo de aplicación

Transporte del paciente al centro de atención de emergencia para el tratamiento y la evaluación posteriores

Deséchelo después de su uso, según las pautas locales de desechos de dispositivos médicos.

Información del Contacto:



Manufacturer : Medical Devices , Inc.



Comuníquese o informe cualquier incidente grave relacionado con este producto al fabricante y a las autoridades reguladoras.

NB# 2862

EC REP Obelis s.a. Bd. Général Wafis 53 1030 Brussels, Belgium Tel: +(32) 2. 732. 59. 54 Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



CLEAN AND DRY WOUND



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING, REMOVE RELEASE LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE



Transport Patient to Emergency Care Facility for Evaluation and Post Treatment

